

Smärtlindring från Philips

Så påverkar smärta din livskvalitet

Vi vill alla kunna utföra våra vardagliga aktiviteter utan smärta. När man upplever smärta är dock den instinktiva reaktionen att minska sin aktivitetsnivå för att undvika detta. Som ett resultat blir man i sämre form och mindre förmögen att göra det man vill. Det är ingen överdrift att säga att det är viktigt att hålla sig aktiv.

Ta itu med dina behov

Philips produkter för smärtlindring erbjuder ett unikt och holistiskt sätt att lindra smärta och stimulera vardaglig aktivitet. De går bortom symtomlindring för att hjälpa dig att förbättra din förståelse för din fysiska förmåga, stimulera aktivitet och få ett mer aktivt liv. Våra produkter har genomgått omfattande undersökningar och tester för att erbjuda dig kliniskt bevisad* smärtlindring utan de biverkningar som förknippas med smärtstillande medel.

*TensRelief – Source: M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomised controlled trials. Pain 130, 157-165.
BlueTouch – Source: Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (Universitätsklinikum Heidelberg), Vortrag Frankfurt, 7. März 2013 re the use of BlueTouch for chronic musculoskeletal back pain.
InfraCare – Source: R. Brenke W. Siems: Infrarotstrahlung eine moderne Form der Wärmetherapie. NaturaMed 21 2006:32-37.



Effektiv och
läkemedelsfri lindring
av ryggsmärta

Philips BlueTouch



www.philips.com/pain-relief

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
or their respective owners.

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All Rights Reserved.

PHILIPS

Philips BlueTouch


Philips BlueTouch är resultatet av flera års intensiv forskning och kombinerar innovation och enkel användning för att hantera ryggsmärta. Med hjälp av sin egen teknik har Philips utvecklat BlueTouch, med en matris av blå LED-lampor (lysdioder).

Vad är blått LED-ljus?

Ljusenergi är väl etablerat inom behandling av smärta, men det är först på senare tid som blått ljus har identifierats för sin förmåga att aktivera kroppens egna, naturliga läkningsprocess. Philips har gått i bräschen för denna innovation med utvecklingen av BlueTouch, som är ett spännande genombrott i behandling av ryggsmärta.

Så här fungerar det

Det blå ljuset hjälper till att stimulera kroppens naturliga frigörelse av kväveoxid i huden. Kväveoxidinducerade signalvägar orsakar vasodilation genom att verka avslappnande på vasculära glatta muskelceller, vilket främjar blodcirkulationen och ökar tillförseln av syre och näring. Detta har en omedelbar avslappnande effekt på spända muskler.

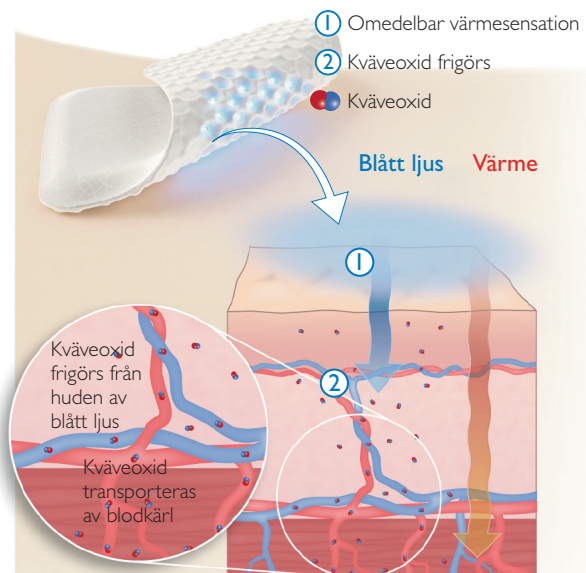

För behandling av:

Mild till måttlig muskelvärk i ryggen

Diskret, bekvämt och flexibelt

Platta för den övre eller nedre delen av ryggen för användning med Philips BlueTouch smärtlindringsplatta. En storlek passar alla. Utformad att sitta bekvämt och diskret under kläder så att användaren enkelt kan integrera BlueTouch i sitt vardagliga liv och njuta av aktiviteter.

Kliniskt bevisad* smärtlindring

Produkten har en kliniskt bevisad smärtlindrande effekt*. Dessutom producerar BlueTouch en välgörande värme som får musklerna att slappna av och ger användaren en känsla av välbefinnande.

Naturligt effektiv

Philips BlueTouch använder värme och aktiverar naturliga läkande processer med blått ljus för att lindra ryggsmärtor utan läkemedel.



Korta behandlingstider med tre intensitetsnivåer:

Intensitetsnivå	Varaktighet	Maximal anv. per dag
1) låg	30 min	2
2) mellan	20 min	2
3) hög	15 min	2

Philips BlueTouch is certified as a medical device by DEKRA in line with European standards (IEC 60601)


* Source: Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (University Clinic Heidelberg, Germany), 24th Interdisciplinary Congress on Pain Therapy and Palliative Care, Frankfurt/Main, Germany, lecture 7 March 2013 re the use of BlueTouch for chronic musculoskeletal back pain.

Produktöversikt

För de som lider av mild till måttlig muskulär ryggsmärta, inklusive axlar och/eller ländrygg

- Philips BlueTouch är en innovativ behandling med blått ljus som har dubbel effekt. Behandlingen ger lindrande värme och stimulerar frigörandet av kroppens kväveoxid för att öka det lokala blodflödet och stödja kroppens naturliga återhämtningsprocesser
- Hjälper till att mildra smärta på ett naturligt sätt utan läkemedel
- Justerbar rem för övre eller nedre delen av ryggen (en storlek passar alla) och utformat att sitta bekvämt och diskret under kläder
- Kontrollera din behandling via din iOS- eller Androidenhet
- Korta behandlingstider med tre intensitetsnivåer
- Rekommenderad användning: två gånger om dagen i upp till 30 minuter.
Känn resultat inom en till två veckor

BlueTouch smärtlindringsplatta

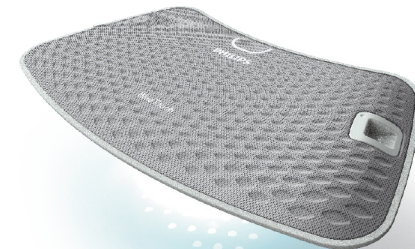

Praktiska remmar

- Bekväm hållare för BlueTouch-platta
- Diskret och enkel att ha på sig
- En storlek passar alla – flexibel utformning
- Enkel att rengöra



Rem för nedre delen av ryggen
En storlek passar alla



Rem för övre delen av ryggen
En storlek passar alla